


Catálogo

 Helsē Ultrasonic



La Revolución Ultrasónica

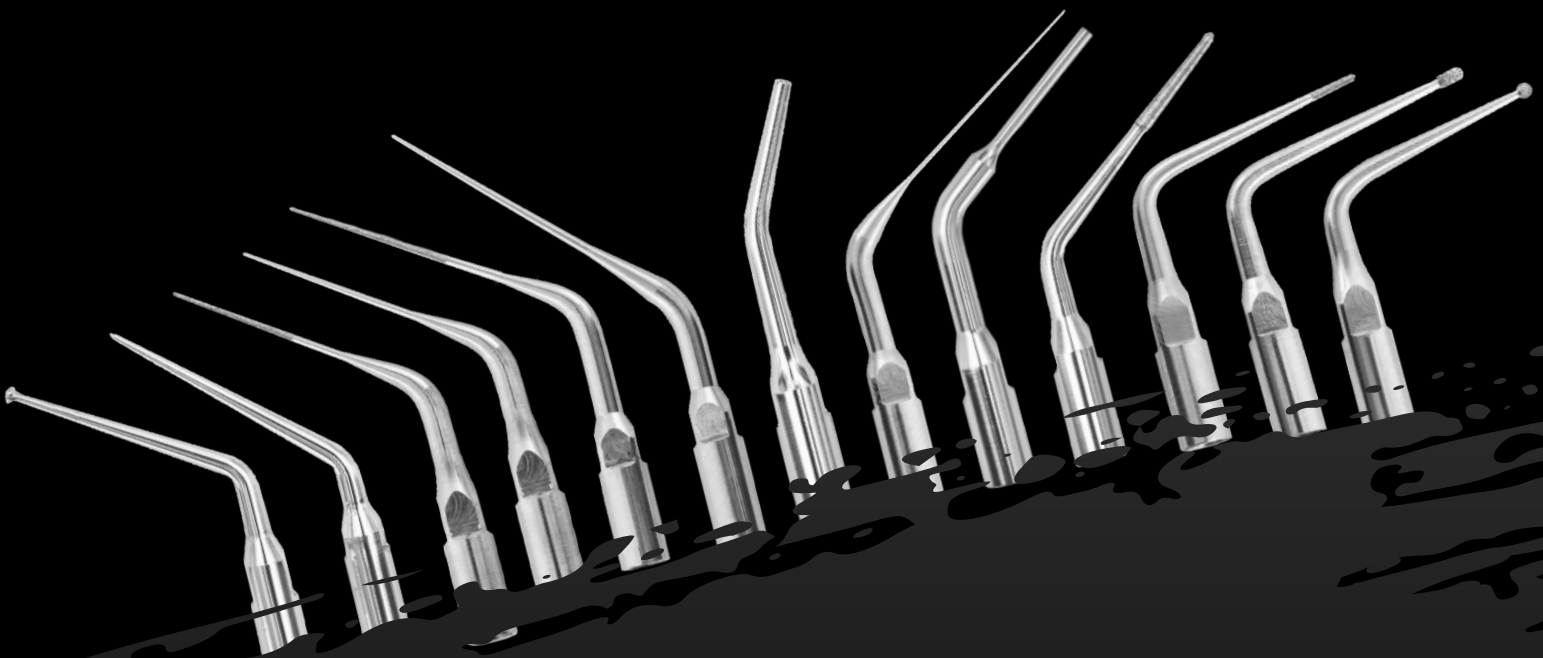

La Revolución Ultrasonica está aquí

En **Helse Ultrasonic** unimos la ingeniería mecánica, física y materiales para crear insertos de ultrasonido con la tecnología, ergonomía, eficiencia y la máxima calidad para satisfacer cualquier necesidad en el tratamiento odontológico.

La misión de **Helse Ultrasonic** es transformar su equipo de ultrasonido con nuestros insertos, en la herramienta más poderosa de su práctica clínica.

Tenemos el compromiso de compartir el conocimiento y técnicas actuales a través de la educación para fortalecer la práctica odontológica respaldada con evidencia científica.

Los productos **Helse Ultrasonic** en México son distribuidos de manera exclusiva por: **Distrito Dental**, empresa que ofrece soluciones integrales en odontología.

En el sitio e-commerce de **Distrito Dental** encontrará un amplio portafolio de productos y equipos vinculados a cada paso de la práctica odontológica y sus diferentes especialidades.

En Helse Ultrasonic y Distrito Dental... tenemos la solución.

distrito-dental.com.mx

Las puntas de **Helse Ultrasonic** están disponibles para cualquier equipo de ultrasonido.

Elige la punta correcta para tu equipo según su **compatibilidad** (N) o (E)

PUNTAS TIPO N (S-Thread)

NSK (Varios)

Acteon / Satelec

Adec

Bonart

Brasseler Forza V3

Dentsply/Tulsa

EIE2

J. Morita

Obtura / Spartan

VDW

Sybron Endo

Vista P5

Gnatus

Shuster

Adiel Plus

DTE

Advanced SE

PUNTAS TIPO E (E-Thread)

Kavo

Woodpecker

W&H

Mectrón

EMS

Hu-Friedy (Serie E)

Scaler Jet

Microdont
(Advanced S e SEL)

Dentamerica

Simplifica tu tratamiento con nuestras soluciones



Procedimientos en la cámara pulpar



Procedimientos en el tercio medio radicular



Procedimientos de activación del irrigante



Procedimientos para cirugía apical



Procedimientos de remoción de postes



Procedimientos de retratamiento



Procedimientos de periodoncia



E1 - IRRISONIC

Código: 100,003(E) / 100,004 (N)

Uso: Se utiliza para activar y potencializar la solución de irrigación después de la preparación del conducto radicular. Conicidad punta/.01 tamaño ISO 20, Irrisonic se puede pre-curvar y utilizar incluso en las anatomías más complejas.

Costo: \$1,129.19

E5 - CONICAL LONG

Código: 100,019 (E) / 100,020 (N)

Uso: Permite la remoción de interferencias o restos de materiales que obstruyen el acceso al conducto radicular.

Costo: \$1,129.19



E12 - POST REMOVAL HP (HIGH POWER)

Código: 100,043 (E) / 100,044 (N)

Uso: Se utiliza para la remoción de postes.

Costo: \$1,129.19

R1 - CLEARSONIC BLACK

Código: 100,062 (E) / 100,063 (N)

Uso: Recomendada para el retratamiento endodóntico permitiendo la eliminación rápida y efectiva de diferentes materiales, así como la limpieza selectiva de zonas que las limas tradicionales no pueden alcanzar.

Costo: \$1,129.19





R2 - FLATSONIC GOLD

Código: 100,066 (E) / 100,067 (N)

Uso: Eficiencia en la remoción de materiales donde la punta R1 Clearsonic Black no es capaz de trabajar.

Costo: \$1,129.19

E10 - CUTCONDENSER

Código: 100,039 (E) / 100,040 (N)

Uso: Se utiliza para remover calcificaciones o materiales de restauración que obstruyen el acceso al conducto, así como cortar y compactar gutapercha.

Costo: \$1,129.19



E15 - THE FINDER

Código: 100,080 (N) / 100,081 (E)

Uso: Inserto con terminación diamantada que facilita la localización de conductos, conductos calcificados e itsmos y definición del acceso.

Costo: \$1,364.44

E14 - CUTCONDENSER

Código: 100,073 (E) / 100,074 (N)

Uso: Recomendada para corte, compactación y remoción de gutapercha.

Costo: \$1,129.19





E6D - PEAR DIAMOND

Código: 110,016 (N) /110,019 (E)

Uso: Punta de pera diamantada que facilita la localización de conductos y eliminación de interferencias coronarias, puede ser utilizada para definir márgenes y preparaciones, al tiempo que se elimina caries.

Costo: \$1,364.44

E7D - ACCESS DIAMOND

Código: 110,023 (N) /110,024 (E)

Uso: Refinamiento del acceso, localización de conductos, calcificaciones, caries, así como definición de márgenes y preparaciones.

Costo: \$1,364.44



P1B - BLADESONIC

Código: 600,003 (E) /600,004 (N)

Uso: Punta quirúrgica indicada para realizar la resección radicular.

Costo: \$1,364.44

P1 - SURGICAL

Código: 40, 003 (E) /40,004 (N)

Uso: Punta quirúrgica indicada para la retropreparación apical convencional (parte activa 3mm).

Costo: \$1,364.00





P1M - SURGICAL LONG

Código: 40,027(E)/40,028 (N)

Uso: Punta quirúrgica indicada para la retropreparación que requiere mayor profundidad (parte activa 5mm).


Costo: \$1,364.44

P1C - SURGICAL CUSTOM

Código: 40,052 (E) / 40,053 (N)

Uso: Punta quirúrgica modificable que puede ser doblada en diversos ángulos según su necesidad.

Costo: \$1,364.44

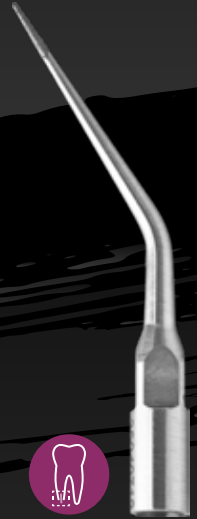

E9 - POST REMOVAL

Código: 100,036 (N) / 100,035 (E)

Uso: Recomendada para remoción de postes metálicos y de fibra de vidrio, especialmente en molares con acceso limitado.


Costo: \$1,129.19


E8 - SCOUTER

Código: 100,031 (E) / 100,032 (N)

Uso: Es utilizada para remover la dentina en la entrada de los conductos y el cemento residual de los postes.

Costo: \$1,129.19

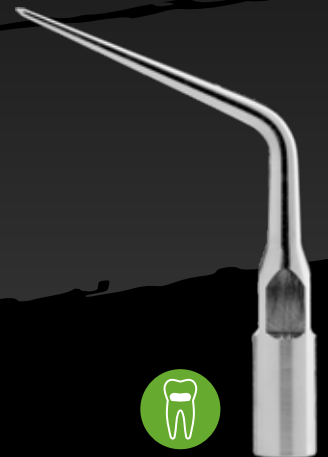

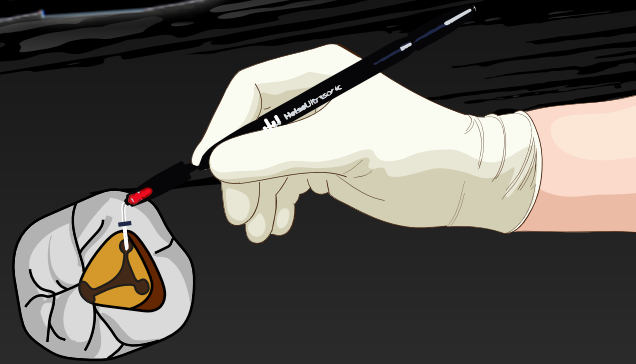


ENDOPEN

Código: 30.003

Uso: Es una herramienta auxiliar que facilita la localización y negociación de los conductos radiculares en los tratamientos endodónticos, ya que permite mayor visibilidad del campo de trabajo haciendo un tratamiento más predecible en anatomías complicadas. EndoPen hace posible pre doblar limas manuales (tipo k, flexo, hedstroem, entre otras).

Herramienta recomendada para pacientes con apertura bucal limitada y clínicos que trabajan con microscopio operatorio dental.

Costo: \$1,176.24

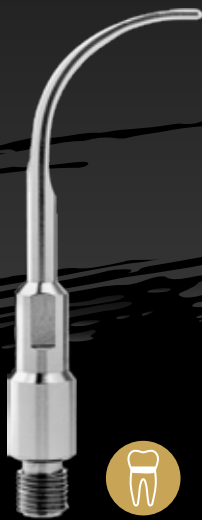

P10 - BIOFILM STRAIGHT

Código: 40,033 (E)

Uso: Inserto de periodoncia que aumenta y facilita la remoción de cálculo y biofilm.

Costo: \$1,129.19

P11 - BIOFILM RIGHT

Código: 70,006 (E) / 70,008 (N)

Uso: Punta larga de periodoncia, con curvatura hacia la derecha, superficie circular y punta redondeada, ideal para furcas inferiores: vestibulares del lado derecho y linguales del lado izquierdo. Para furcas superiores: vestibular y distal de los molares izquierdos y furcas mesiales: de los premolares del lado izquierdo y de los molares del lado derecho.

Costo: \$1,129.19





P12 - BIOFILM LEFT

Código: 70,003 (N) / 70,004 (E)

Uso: Punta larga, con curvatura hacia la izquierda, superficie circular y punta redondeada, ideal para furcas inferiores: vestibulares del lado izquierdo y linguales del lado derecho; y furcas superiores: vestibular y distal de los molares derechos; furcas mesiales: de los premolares del lado derecho y de los molares del lado izquierdo.

Costo: \$1,129.19



LowSpray

Con Helse y su tecnología LowSpray no hay necesidad de preocuparse por la contaminación cruzada de aerosoles.



Low-Spray

A diferencia de los insertos ultrasónicos regulares, en los que el agua fluye por toda la superficie para llegar al extremo de trabajo, las puntas Helse Low-Spray tienen un puerto de irrigación de posición único, lo que permite que el agua salga exactamente en el área de trabajo, generando menos aerosol y manteniendo las estructuras dentales y tejidos a salvo de altas temperaturas.



Seguridad

Menos aerosol significa una interfaz de contaminación menor y eso ayuda a reducir el riesgo para los profesionales de la salud y sus pacientes.

La eliminación de los vectores de contaminación está ampliamente reconocida como una de las principales medidas para salvar vidas durante las crisis epidémicas y pandémicas.

Al adoptar una tecnología que reduce la contaminación, Helse está contribuyendo a la lucha contra el **COVID19**.



Menos Ruido

Las puntas Helse son compatibles con la mayoría de las unidades ultrasónicas piezoeléctricas disponibles en el mercado. Se sabe que la energía ultrasónica producida por esas máquinas genera considerablemente menos ruido que los ultrasonidos magnetostrictivos. Eso significa menos estrés para el paciente y menos contaminación auditiva.

Indicado para

Eliminación
biofilm

Eliminación
cálculo

Retracción
gingival

Bolsas
periodontales
profundas

Pacientes
sensibles

Quando comparas la puntas de **Helse Ultrasonic** con otras marcas, todo tiene sentido.

Características	Otras marcas	LowSpray
Puerto de agua	En la base de la punta	Al final de la punta
Potencia óptima	Medio a alto	Bajo a medio
Producción de aerosoles	Contaminación por aerosol elevada y de alto alcance	Contaminación por aerosol baja y de menor alcance
Ruido	Ruido alto y de alta intensidad	Ruido de bajo a medio y de baja intensidad

Las puntas de la línea LowSpray de **Helse Ultrasonic** minimizan las molestias en el paciente, lo que permite tratar sin anestesia incluso a los más sensibles.



LowSpray

Con la tecnología **LowSpray** de Helse Ultrasonic no necesitas preocuparte por la contaminación de aerosoles.

Solo necesitas las puntas correctas.

LS1-PERIOBLADE1

Código: 600,014 (E) / 600,011 (N)

Uso: Recomendada para procedimientos en áreas de retracción gingival. Su diseño es excelente para eliminar biofilm y cálculo de premolares y molares. Se debe utilizar principalmente para la limpieza supragingival y para la limpieza subgingival debe limitarse a bolsas poco profundas.

Costo: \$1,129.19



LS2-PERIOBLADE2

Código: 600,013 (E) / 600,010 (N)

Uso: Elimina el biofilm y cálculo, tanto supragingival como subgingival, incluso en pacientes que presentan bolsas periodontales profundas.

Costo: \$1,129.19



LS3-PERIOBLADE3

Código: 600,028 (E) / 600,027 (N)

Uso: Elimina la biopelícula y cálculo, tanto supragingival como subgingival, incluso en pacientes que presentan bolsas periodontales profundas.

Costo: \$1,129.19

Encuentranos en:



55 3644 4048



ventas@distrito-dental.com.mx



Av. Insurgentes Sur 1548 int. 2B,
Crédito Constructor, Benito Juárez,
CDMX, 03940 (entrada Febo 1)



distritodentalMx

distrito-dental.com.mx

